


**fn**

*trolleys for healthcare*

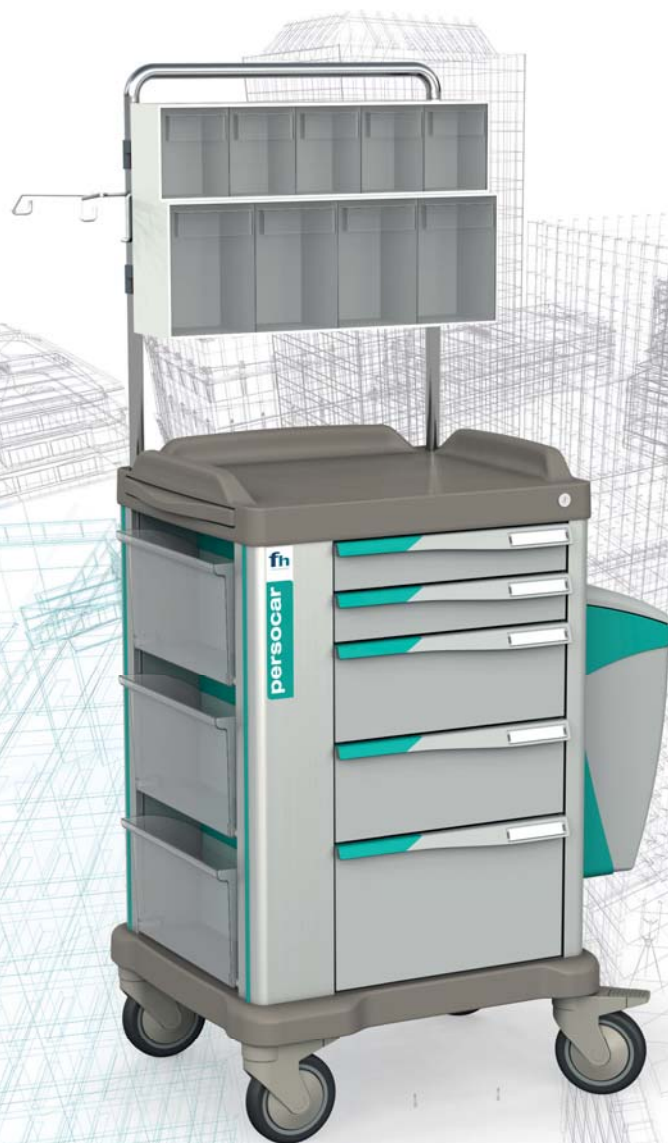

**persocar**

**Carrelli da reparto**  
The ward trolleys  
Chariots biomédicaux

**Cassetti** in plastica ABS stampati ad iniezione, disponibili in 4 altezze

**Drawers:** injection moulded ABS plastic, available in 4 heights

**Tiroirs** en ABS injecté, disponibles en 4 hauteurs

**Maniglia di spinta** integrata su tre lati

**Push-handle:** built-in on three sides

**Poignées** de préhension intégrées au plan de travail

**Piano di lavoro** spazioso

**Worktop:** wide space

**Plan de travail** spacieux

**Struttura in alluminio**

che lo rende leggero

**Structure:**

extruded aluminium, light and strong

**Structure**

en aluminium légère et robuste

**Pareti laterali** laterali in tecnopolimero termoformato per accogliere gli accessori

**Lateral sides:**

in moulded plastic with built-in compartments for accessories

**Parois latérales** en polystyrole thermoformé à équiper avec des accessoires

**Ruote** Ø 150 mm, 2 con freno, doppio cuscinetto a sfera

**Wheels:** Ø 150 mm, 2 with brake, double ball-bearing

**Roues** Ø 150 mm, 2 à frein, double roulements à billes

**Guide cassetti** di altissima qualità, rientro automatico, estrazione totale

**Drawer rails:** optimum quality, self-closing system, full-extended

**Cadre télescopique** pour une sortie totale avec frein de retenue à la fermeture

**Base** in plastica ABS con paraurti perimetrale

**Base:** ABS plastic with all-around bumper


**Base** en ABS avec pare-chocs intégré




## Diversi modelli per ogni esigenza

Carts in different sizes, for every need


Différents modèles pour tous les besoins

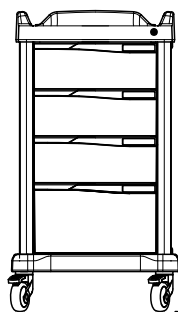


← 571 mm →

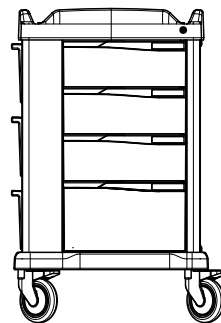

← 662 mm →

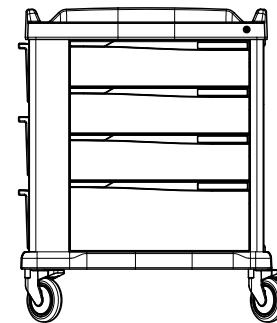

← 855 mm →

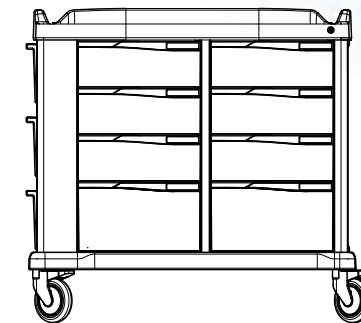

← 1115 mm →

Mod.	PERSOCAR COMPACT PT4	PERSOCAR 400 P4	PERSOCAR 600 P6	PERSOCAR 800 P8
Cassetti Larghezza mm Drawers Width mm Tiroirs Largeur mm	400	400	600	400 + 400
Moduli cassetti / Drawer modules / Modules tiroirs	9	9	9	9 + 9
Dim. LxPxH mm / Dim. WxDxH mm / Dim. LxPxH mm	571x594x1050	662x594x1050	855x594x1050	1115x594x1050
Altezza piano di lavoro h. mm Worktop height mm Hauteur plan de travail h. mm	1000	1000	1000	1000
Spazio utile piano di lavoro mm Worktop useful space mm Surface utile du plan de travail mm	476x482	518x482	711x482	970x482
Peso Kg / Weight Kg / Poids Kg	43	52	63	98
Portata complessiva Kg Total capacity Kg Charge utile Kg	300	300	300	300



Quando lo spazio detta le regole, un carrello compatto è una necessità.

PERSOCAR COMPACT è caratterizzato dal suo ridottissimo ingombro, ma da un grande volume di carico.

When the space dictates the rules, a very compact cart is required.

PERSOCAR COMPACT is characterized by small footprint, but big load capacity.

Lorsque l'espace est restreint, un chariot compact est nécessaire.

PERSOCAR COMPACT est caractérisé par son faible encombrement, mais avec une grande capacité de stockage.



### Configurazione standard

- Pareti sinistra: liscia
- Parete destra: liscia
- Chiusura a chiave dei cassetti
- Schiena con:
  - Porta catetere
  - Vano porta-oggetti
  - Vano con cinghie (bottiglia, contenitore taglienti)

### Standard configuration

- Left side: flat
- Right side: flat
- Key lock system for the drawers
- Back side:
  - Catheter holder
  - Glove compartment
  - Compartment with straps (for bottle or sharp container)

### Configuration standard

- Paroi latérale gauche : lisse
- Paroi latérale droite : lisse
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- À l'arrière, emplacements pour :
  - Les sondes
  - Une boîte de gants
  - Une bouteille ou solution hydroalcoolique avec sangle de maintien



## Carrello anestesia

- 4 cassetti  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- Pareti laterali predisposte per barre porta accessori
- Sopralzo con 3 barre, distributore siringhe/ago e altri accessori

## Anaesthesia cart

- 4 drawers  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- Lateral sides can be equipped with accessory rails
- Overbridge with 2 accessory rails, syringes/needles distributor and other accessories

## Chariot d'anesthésie

- 4 tiroirs  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- Parois latérales pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires
- Réhausse équipée de 2 rails normalisés, d'un distributeur de seringues et d'aiguilles et d'autres accessoires

PT40L4-M354

## Carrello medicazione

- 4 cassetti  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- Pareti laterali predisposte per barre porta accessori
- Sopralzo con 2 barre e 2 mensole

## Dressing cart

- 4 drawers  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- Lateral sides can be equipped with accessory rails
- Overbridge with 2 accessory rails and 2 trays

## Chariot de pansements

- 4 tiroirs  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- Parois latérales pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires
- Réhausse équipée de 2 rails normalisés et de 2 étagères en plastique ABS

PT40L4-M2VAD

### In evidenza

#### Digicode

- Alternativa alla chiusura a chiave.
- Codici Utente a 4 cifre
  - Codici Master e Sub-Master a 8 cifre
  - Modalità Codici Utenti Multipli

### Highligh

#### Digicode

- As an alternative to the key-lock, the electronic.
- User Codes are 4 digits long
  - Master and Sub-Master Codes are 8 digits long
  - Multiple User Code mode

### Détail

#### Digicode

- Une alternative au verrouillage centralisé avec clé.
- Code Utilisateur à 4 chiffres
  - Code Maître et Sous-maître à 8 chiffres
  - Mode Multi-utilisateurs



## Carrello porta cartelle

- Cassetto basso h. 76 mm
- 2 cassettoni h. 316 mm con telaio porta cartelle formato A4
- Chiusura centralizzata a chiave
- Pareti laterali predisposte per barre porta accessori



## Patient file cart

- Low drawer h. 76 mm
- 2 big-drawers h. 316 mm with hanging chart frame, A4 size
- Centralized closing by key
- Lateral sides can be equipped with accessory rails

## Chariot pour dossiers patients

- Petit tiroir h. 76 mm
- 2 grands tiroirs h. 316 mm équipés chacun d'un insert pour dossiers suspendus format A4
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- Parois latérales pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires

## Carrello terapia

- 6 cassetti  
3x h. 76 mm, 3x h. 156 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- Maxiwall per rifiuti

## Dressing cart

- 6 drawers  
3x h. 76 mm, 3x h. 156 mm
- Centralized closing by key
- Maxiwall waste bin

## Chariot de soins

- 6 tiroirs  
3x h. 76 mm, 3x h. 156 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- Paroi latérale gauche pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires
- Collecteur de déchets Maxiwall 20 litres



### In evidenza

#### Tasselli colorati

- Tasselli colorati sui cassetti per identificare il contenuto e la funzione del carrello.
- Disponibili in 9 colori.
- Facilmente intercambiabili. Sono dati in dotazione al carrello.

### Highligh

#### Coored Identification tags

- Coloured ID tag for the drawers, to identify the content and the purpose of the cart.
- Available in 9 colours.
- Easy to interchange.
- They come with the cart.

### Détail

#### Réglettes de couleurs

- Réglettes de couleur sur les tiroirs permettant l'identification de leur contenu.
- 9 coloris disponibles.
- Facilement interchangeables.

**PERSOCAR 400 è il più richiesto carrello da reparto grazie alle dimensioni ottimali per un impiego in qualsiasi ambiente.**

**The most popular ward trolley, thanks to the optimal size it is used in any environment.**

**PERSOCAR 400 est le chariot le plus apprécié grâce à sa taille optimale qui lui permet d'être utilisé à tout moment et dans n'importe quel environnement.**



### Configurazione standard

- Piano laterale estraibile
- Parete sinistra: 3 vani laterali ribaltabili
- Parete destra: liscia
- Chiusura a chiave dei cassetti
- Schiena con:
  - Porta catetere
  - Vano porta-oggetti
  - Vano con cinghie (bottiglia, contenitore taglienti)

### Standard configuration

- Lateral extractable surface
- Left side: 3 tilt-out bins
- Right side: flat
- Key lock system for the drawers
- Back side:
  - Catheter holder
  - Glove compartment
  - Compartment with straps (for bottle or sharp container)

### Configuration standard

- Tablette latérale étirable
- Paroi latérale gauche : 3 bacs basculants
- Paroi latérale droite : lisse
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- À l'arrière, emplacements pour :
  - Les sondes
  - Une boîte de gants
  - Une bouteille ou solution hydroalcoolique avec sangle de maintien

P40L4





## Carrello anestesia

- 5 cassetti  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Maxiwally per rifiuti
- Sopralzo con 2 barre, distributore siringhe/aghi e altri accessori

## Anaesthesia cart

- 5 drawers  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails
- Maxiwally waste bin
- Overbridge with 2 accessory rails, syringes/needles distributor and other accessories

## Chariot d'anesthésie

- 5 tiroirs  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Collecteur de déchets Maxiwally 20 litres
- Réhausse équipée de 2 rails normalisés, d'un distributeur de seringues et d'aiguilles et d'un support porte sérum

P40W5-M254



## Carrello medicazione

- 5 cassetti  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori
- Sopralzo con 2 barre e 2 mensole

## Dressing cart

- 5 drawers  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails
- Overbridge with 2 accessory rails and 2 trays

## Chariot de pansements

- 5 tiroirs  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires
- Réhausse équipée de 2 rails normalisés et de 2 étagères en plastique ABS

P40L5-M2VAD



### In evidenza

#### Porta etichette

- Ampio porta etichette, con vetrino di protezione.
- Etichette di carta in dotazione al carrello.

### Highligh

#### Label holder

- Wide label holder with protecting glass.
- Paper labels come with the cart.

### Détail

#### Porte-étiquette

- Large porte-étiquette sur la façade du tiroir permettant l'identification de son contenu.
- Le chariot est livré avec des étiquettes en papier.



## Carrello multiuso

- 4 cassetti  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale con 2 barre porta accessori



P40P4

## Multifunction cart

- 4 drawers  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side with 2 accessory rails

## Chariot multifonction

- 4 tiroirs  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite équipée de 2 rails normalisés porte-accessoires

## Carrello porta cartelle

- Cassetto basso h. 76 mm
- 2 cassettoni h. 316 mm con telaio porta cartelle formato A4
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori



P40LO SPECIAL

## Patient file cart

- Low drawer h. 76 mm
- 2 big-drawers h. 316 mm with hanging chart frame, A4 size
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral sides can be equipped with accessory rails

## Chariot pour dossiers patients

- Petit tiroir h. 76 mm
- 2 grands tiroirs h. 316 mm équipés chacun d'un insert pour dossiers suspendus format A4
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



### In evidenza

#### Barra accessori con SABU

Barre laterali in alluminio 25x10 mm con originale sistema di fissaggio SABU che consente di spostarle e regolarle in qualsiasi momento.

### Highligh

#### Accessory rail with SABU system

Aluminium lateral accessory rail 25x10 mm with unique fixing system SABU: easy to install and adjust at any time.

### Détail

#### Rail normalisé porte-accessoires équipé du système SABU

Rail latéral normalisé porte-accessoires en aluminium 25x10 mm équipé du système de fixation SABU. Facile à installer et ajustable en hauteur à tout moment.

## Carrello terapia Broselow

- 9 cassetti h. 76 mm con tassello in 9 colori
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Therapy cart – Broselow code

- 9 drawers h. 76 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot de soins – Broselow

- 9 tiroirs h. 76 mm équipés de 9 réglettes de couleur
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



## Carrello terapia

- 5 cassetti  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Maxiwall per rifiuti

## Therapy cart

- 5 drawers  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Maxiwall waste bin

## Chariot de soins

- 5 tiroirs  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Collecteur de déchets Maxiwall 20 litres



### In evidenza

#### Profilo verde

Finitura dei montanti in gomma verde.

### Highligh

#### Rubber green finishing

Embellishment finishing in green rubber.

### Détail

#### Profilé vert

Finition des montants avec des profilés en caoutchouc vert.

## Carrello terapia con mensoline

- 5 cassetti  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 mensoline in plastica verde, incassate
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori



P41L5

## Therapy cart with lateral trays

- 5 drawers  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 4 built-in green plastic trays
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot de soins avec étagères latérales intégrées

- 5 tiroirs  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 4 étagères intégrées en plastique ABS vert
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires

## Carrello terapia con vani ribaltabili

- 4 cassetti  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori



P40L4

## Therapy cart

- 4 drawers  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot multifonction

- 4 tiroirs  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



### In evidenza

#### Piano laterale

- Piano laterale estraibile a richiesta.
- Ampia superficie di appoggio.
- In plastica ABS stampata ad iniezione.

### Highligh

#### Additional lateral working surface

- Lateral extendable surface, on request.
- Wide working area.
- ABS plastic injection molded.

### Détail

#### Tablette étirable

- Tablette latérale étirable.
- Grande surface de travail.
- En plastique ABS injecté gris.



**PERSOCAR 600** consente l'esatta configurazione e capacità di stoccaggio necessaria tutti i giorni in reparto.

Un super volume in un carrello dalle dimensioni comuni.

**PERSOCAR 600** ensures you get the exact cart size and storage configuration you require in your daily ward activity.

Super storage in a typical cart size.

**PERSOCAR 600** vous permet d'obtenir une configuration précise de votre chariot avec un maximum de stockage nécessaire dans votre activité quotidienne.

Un volume de stockage important avec des dimensions standards.



### Configurazione standard

- Piano laterale estraibile
- Parete sinistra: 3 vani laterali ribaltabili (CPO)
- Parete destra: liscia
- Chiusura a chiave dei cassetti
- Schiena con:
  - Porta catetere
  - Vano porta-oggetti
  - Vano con cinghie (bottiglia, contenitore taglienti)
  - 3 scomparti con sistema di blocco

### Standard configuration

- Lateral extractable surface
- Left side: 3 tilt-out bins
- Right side: flat
- Key lock system for the drawers
- Back side:
  - Catheter holder
  - Glove compartment
  - Compartment with straps (for bottle or sharp container)
  - 3 compartments with blocking system

### Configuration standard

- Tablette latérale étirable
- Paroi latérale gauche : 3 bacs basculants
- Paroi latérale droite : lisse
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- À l'arrière, emplacements pour :
  - Les sondes
  - Une boîte de gants
  - Une bouteille ou solution hydroalcoolique avec sangle de maintien
- 3 compartiments de rangement avec système de maintien

## Carrello terapia con mensoline

- 4 cassetti  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 mensoline in plastica verde, incassate
- Maxiwall per rifiuti

## Therapy cart with lateral trays

- 4 drawers  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 4 built-in green plastic trays
- Maxiwall waste bin

## Chariot de soins avec étagères latérales intégrées

- 4 tiroirs  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 4 étagères intégrées en plastique ABS vert
- Collecteur de déchets Maxiwall 20 litres



P61W4



P60W5

## Carrello terapia

- 5 cassetti  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Maxiwall per rifiuti

## Therapy cart

- 5 drawers  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot de soins

- 5 tiroirs  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Collecteur de déchets Maxiwall 20 litres

### In evidenza

#### Maniglia su tre lati

Maniglia di spinta integrata al piano di lavoro su tre lati. Per una movimentazione ottimizzata.

### Highligh

#### Easy manoeuvrability thanks to the push handles on 3 sides

Pushing handle integrated to the worktop, on three sides, granted the best handling.

### Détail

#### Poignée sur 3 côtés

Poignée de préhension intégrée au plan de travail.



## Carrello multiuso

- 6 cassetti  
3x h. 76 mm, 3x h. 156 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Multifunction cart

- 6 drawers  
3x h. 76 mm, 3x h. 156 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot multifonction

- 6 tiroirs  
3x h. 76 mm, 3x h. 156 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



P60L6

## Carrello terapia Broselow

- 9 cassetti h. 76 mm con tassello in 9 colori
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Therapy cart – Broselow code

- 9 drawer h. 76 mm with coloured ID tag
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot de soins – Broselow

- 9 tiroirs h. 76 mm équipés de 9 réglettes de couleur
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



P60L9

### In evidenza

#### Base con paraurti

Resistente base in plastica ABS con paraurti perimetrale integrato.

### Highligh

#### Strong base to protect cart and walls

Strong ABS plastic base with integrated all-around bumper.

### Détail

#### Base avec pare-chocs

Base en plastique ABS gris avec pare-chocs en périphérie intégrés.







## Carrello medicazione

- 5 cassetti  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori
- Sopralzo con 3 barre, distributore siringhe/aghi e altri accessori

## Dressing cart

- 5 drawers  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails
- Overbridge with 3 accessory rails, syringes/needles distributor and other accessories

## Chariot de pansements

- 5 tiroirs  
2x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires
- Réhausse équipée de 3 rails normalisés, d'un distributeur de seringues et d'aiguilles et d'autres accessoires



## Carrello anestesia

- 4 cassetti  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori
- Sopralzo con 2 barre e distributore siringhe/aghi

## Anaesthesia cart

- 4 drawers  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails
- Overbridge with 2 accessory rails and syringes/needles distributor

## Chariot d'anesthésie

- 4 tiroirs  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires
- Réhausse équipée de 2 rails normalisés et d'un distributeur de seringues et d'aiguilles



### In evidenza

#### Tasca laterale porta documenti

Spaziosa e comoda per posizionare documenti e lastre radiografiche.

### Highligh

#### Pocket for documents

Spacious and convenient side pocket to place documents and X-rays.

### Détail

#### Emplacement latéral pour documents

Spacieux pour le rangement de documents et de radiographies.

## Carrello multiuso con porta documenti

- 4 cassetti  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- Tasca porta documenti o lastra, incassata
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Multifunction cart with lateral document pocket

- 4 drawers  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Centralized closing by key
- Built-in pocket for documents and X-rays
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot multifonction avec porte-documents

- 4 tiroirs  
3x h. 156 mm, 1x h. 236 mm
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- Emplacement pour le rangement de documents et de radiographies
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



P62L4

## Carrello porta cartelle

- 4 cassetti  
1x h. 76 mm, 2x h. 156 mm,  
1x h. 316 mm con telaio porta cartelle A4
- Chiusura centralizzata a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Partient file cart

- 4 drawers  
1x h. 76 mm, 2x h. 156 mm,  
1x h. 316 mm with hanging charts, A4 size
- Centralized closing by key
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot pour dossiers patients

- 4 tiroirs  
1x h. 76 mm, 2x h. 156 mm, 1x h. 316 mm  
équipé d'un insert pour dossiers suspendus  
format A4
- Verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



P60L0 SPECIAL

### In evidenza

#### Pareti termoformate

Pareti laterali termoformate in plastica verde-turchese per accogliere gli accessori.

### Highligh

#### Moulded lateral sides to reduce footprint

Lateral side in thermoformed turquoise-green plastic to accommodate the accessories.

### Détail

#### Parois termoformées

Parois latérales et arrière en plastique ABS thermoformé vert turquoise permettant la fixation d'accessoires.




Grandi necessità, grandi volumi di stoccaggio.

PERSOCAR 800 ha una doppia fila di cassetti per raddoppiare le prestazioni.

Maximum capacity for maximum storage and organization. PERSOCAR 800 has a double row of drawers for double the performance.

Grande capacità, pour un stockage et une organisation maximum.

PERSOCAR 800 c'est une double rangée de tiroirs pour une double performance.

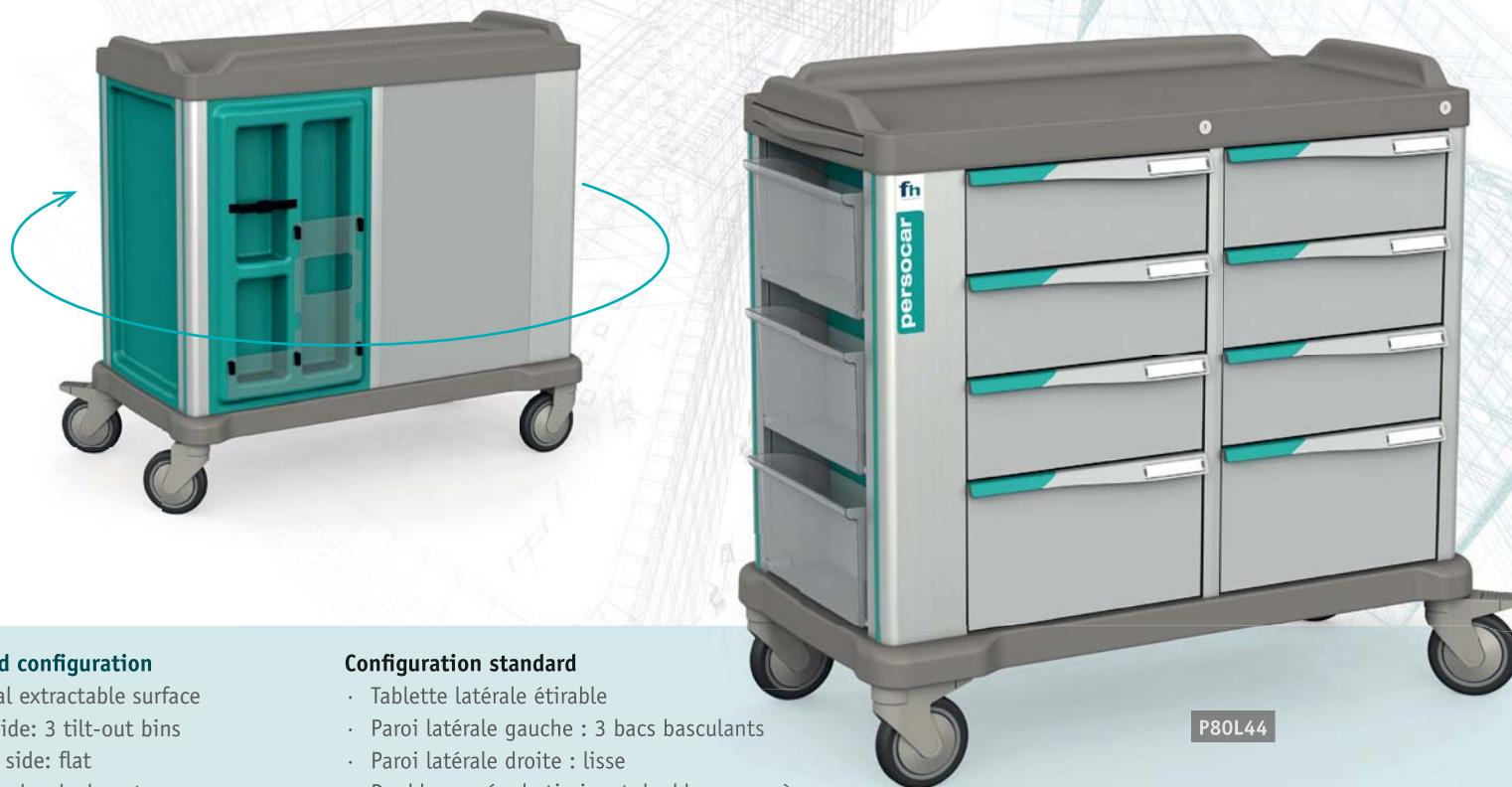

### Configurazione standard

- Piano laterale estraibile
- Parete sinistra: 3 vani laterali ribaltabili
- Parete destra: liscia
- Doppia chiusura a chiave per le due file di cassetti
- Schiena con:
  - Porta catetere
  - Vano porta-oggetti
  - Vano con cinghie (bottiglia, contenitore taglienti)

### Standard configuration

- Lateral extractable surface
- Left side: 3 tilt-out bins
- Right side: flat
- Double key lock system for the two row of drawers
- Back side:
  - Catheter holder
  - Glove compartment
  - Compartment with straps (for bottle or sharp container)

### Configuration standard

- Tablette latérale étirable
- Paroi latérale gauche : 3 bacs basculants
- Paroi latérale droite : lisse
- Double rangée de tiroirs et double serrure à clé verrouillable indépendamment
- À l'arrière, emplacements pour :
  - Les sondes
  - Une boîte de gants
  - Une bouteille ou solution hydroalcoolique avec sangle de maintien

P80L44



## Carrello medicazione

- 5 + 5 cassette  
2 + 2x h. 76 mm, 2 + 2x h. 156 mm,  
1 + 1x h. 236 mm
- Doppia chiusura a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Maxiwally per rifiuti
- Sopralzo con 3 barre, distributore siringhe/aghi e altri accessori

## Dressing cart

- 5 + 5 drawers  
2 + 2x h. 76 mm, 2 + 2x h. 156 mm,  
1 + 1x h. 236 mm
- Double closing by keys
- 3 lateral tilt-out bins
- Maxiwally waste bin
- Overbridge with 3 accessory rails, syringes/  
needles distributor and other accessories

## Chariot de pansements

- 5+5 tiroirs  
2 + 2x h. 76 mm, 2 + 2x h. 156 mm,  
1 + 1x h. 236 mm
- Double verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Collecteur de déchets Maxiwally 20 litres
- Réhausse équipée de 3 rails normalisés, d'un  
distributeur de seringues et d'aiguilles et  
d'autres accessoires



P80W55-M354 - SPECIAL

## Carrello anestesia

- 5 + 5 cassette: 2 + 2x h. 76 mm,  
2 + 2x h. 156 mm, 1 + 1x h. 236 mm
- Doppia chiusura a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre  
porta accessori
- Sopralzo con 2 barre, distributore siringhe/aghi  
e altri accessori

## Anaesthesia cart

- 5 + 5 drawers: 2 + 2x h. 76 mm,  
2 + 2x h. 156 mm, 1 + 1x h. 236 mm
- Double closing by keys
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails
- Overbridge with 2 accessory rails, syringes/  
needles distributor and other accessories

## Chariot d'anesthésie

- 5+5 tiroirs : 2 + 2x h. 76 mm,  
2 + 2x h. 156 mm, 1 + 1x h. 236 mm
- Double verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de  
rails normalisés porte-accessoires
- Réhausse équipée de 2 rails normalisés, de 2  
distributeurs d'aiguilles et d'autres accessoires



P80L55-M255 - SPECIAL

### In evidenza

#### Doppia chiusura

Doppia fila di cassette e doppia chiusura per rendere indipendenti e sicure le operazioni.

### Highligh

#### Double key-closing - indipendet rows

Double row of drawers and double lock to make independent and safe the operations.

### Détail

#### Double serrure à clé

Double rangée de tiroirs et double serrure à clé verrouillable indépendamment.



## Carrello multiuso – pediatria

- 5 + 4 cassetti  
1 + 1x h. 156 mm, 4 + 1x h. 156 mm,  
2x h. 236 mm
- Doppia chiusura a chiave
- 2 vani laterali a ribalta
- 1 mensolina in plastica verde, incassata
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Multifunction cart – paediatric

- 5 + 4 drawers  
1 + 1x h. 156 mm, 4 + 1x h. 156 mm,  
2x h. 236 mm
- Double closing by keys
- 2 lateral tilt-out bins
- 1 built-in green plastic tray
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot multifonction – pédiatrie

- 5 + 4 tiroirs  
1 + 1x h. 156 mm, 4 + 1x h. 156 mm,  
2x h. 236 mm
- Double verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 2 bacs basculants latéraux et 1 étagère intégrée en plastique ABS vert
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



P8 - SPECIAL

## Carrello terapia

- 6 + 4 cassetti  
3 + 1x h. 76 mm, 3 + 1x h. 156 mm,  
2x h. 236 mm
- Doppia chiusura a chiave
- 3 vani laterali a ribalta
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Dressing cart

- 6 + 4 drawers  
3 + 1x h. 76 mm, 3 + 1x h. 156 mm,  
2x h. 236 mm
- Double closing by keys
- 3 lateral tilt-out bins
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariot de soins

- 6 + 4 tiroirs  
3 + 1x h. 76 mm, 3 + 1x h. 156 mm,  
2x h. 236 mm
- Double verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 3 bacs basculants latéraux
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



P8OL60 SPECIAL

### In evidenza

#### Mensoline laterali per aumentare la flessibilità

Nuove mensoline laterali, multifunzione.  
Quantità a richiesta suggerito massimo 4 pezzi.

### Highligh

#### New compartments to better the flexibility

New side trays, multifunction. Quantity on  
demand, suggested maximum 4 pieces.

### Détail

#### Étagères latérales intégrées

Nouvelles étagères latérales intégrées en  
plastique ABS vert.  
4 étagères maximum.



## Carrello giro visita – con tasca documenti

- 3 + 3 cassetti  
1 + 1x h. 76 mm, 2 + 2x h. 316 mm con telaio per cartelle in formato A4
- Doppia chiusura centralizzata a chiave
- Tasca porta documenti o radiografie
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Round cart

- 3 + 3 cassetti  
1 + 1x h. 76 mm, 2 + 2x h. 316 mm with hanging charts frame, A4 size
- Double closing by keys
- Lateral pocket for documents and X-rays
- Lateral side can be equipped with accessory rails

## Chariots dossiers patients

- 3 + 3 tiroirs  
1 + 1x h. 76 mm, 2 + 2x h. 316 mm équipés chacun d'un insert pour dossiers suspendus format A4
- Double verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- Emplacement pour le rangement de documents et de radiographies
- Paroi latérale droite pouvant être équipée de rails normalisés porte-accessoires



## Carrello multiuso

- 5 + 4 cassetti  
1 + 1x h. 156 mm, 4 + 1x h. 156 mm, 2x h. 236 mm
- Chiusura centralizzata a chiave
- 4 mensoline in plastica verde, incassate
- Parete laterale predisposta per barre porta accessori

## Multifunction cart

- 5 + 4 drawers  
1 + 1x h. 156 mm, 4 + 1x h. 156 mm, 2x h. 236 mm
- Double closing by keys
- 4 built-in green plastic trays
- Maxiwall waste bin

## Chariot multifonction

- 5 + 4 tiroirs  
1 + 1x h. 156 mm, 4 + 1x h. 156 mm, 2x h. 236 mm
- Double verrouillage centralisé des tiroirs par clé
- 4 étagères intégrées en plastique ABS vert
- Collecteur de déchets Maxiwall 20 litres



### In evidenza

#### Vani laterali

3 contenitori basculanti in materiale plastico traslucido con apertura a 30°, amovibili per la pulizia.

### Highligh

#### Lateral compartments for extra space

3 tilt-out translucent plastic containers with an opening at 30°, removable for cleaning.

### Détail

#### Bacs basculants latéraux

3 bacs basculants latéraux de rangement en plastique translucide injecté avec ouverture à 30°. Amovibles pour un nettoyage aisé.



# PERSOCAR – caratteristiche generali

## PERSOCAR – caractéristiques générales

### Materiali di qualità utilizzati intelligentemente.

- Struttura autoportante robustissima e leggera grazie all'accoppiamento intelligente di montanti in alluminio estruso anodizzato con piano e base inscatolati in acciaio.
- Pareti (destra, sinistra e schiena) in tecnopolimero termoformato, con scomparti incassati per ridurre l'ingombro.
- Vano frontale per l'alloggiamento di cassette, per un totale di 9 moduli.
- Cassetti in plastica ABS, stampati ad iniezione di robustissima costruzione; maniglia su tutta la lunghezza frontale, completa di ampio porta etichetta con vetrino di protezione e placchetta colorata intercambiabile per l'identificazione del contenuto (9 colori disponibili): rosso, verde, giallo, blu, viola, grigio, arancione, rosa e bianco.
- Cassetti disponibili in 4 altezze: 76, 156, 236 e 316 mm. I cassette poggiano su un telaio che incorpora le guide, per una facile interscambiabilità e pulizia. Guide quadro con cuscinetti a sfera, di ottima qualità, ad estrazione totale e con rientro automatico. Portata 45 Kg a cassetto.
- Chiusura centralizzata a chiave (o digitale) di tutti i cassette.
- Disponibilità di un'ampia gamma di vaschette con divisori e porta etichette per una perfetta e razionale organizzazione del contenuto dei cassette, oltre a una facile pulizia e riorganizzazione del cassetto.
- Piano di lavoro in plastica ABS in termoformatura, con tre bordi rialzati h. 48 mm e bordo anteriore anti-sgocciolamento, antiurto e antigraffio, facilmente lavabile e sanificabile. Altezza da terra 100 cm. Spazio utile: vedi tabella generale pag. 3.
- Maniglia di spinta integrata su tre lati, sagomata per una presa sicura che garantisce facile manovrabilità.
- Piano di lavoro aggiuntivo estraibile in plastica ABS stampata ad iniezione.
- Nella versione 400, 600 e 800 il fianco sinistro incorpora 3 contenitori basculanti in materiale plastico traslucido con apertura a 30°, amovibili per la pulizia.  
>> in alternativa mensoline in plastica color verde-turchese.
- Fianco destro predisposto per molteplici accessori e barre porta-accessori.
- La schiena incorpora un porta cateteri/sonde con doppia apertura per le diverse lunghezze e un vano porta-oggetti, entrambi con parete frontale amovibile per una facile pulizia, oltre a un alloggio per contenitore taglienti o bottiglia con cinghia di fissaggio.
- Fondo in plastica ABS in termoformatura e supportato da un telaio in acciaio, dotato di paracolpi perimetrale, antiurto e antigraffio, facilmente sanificabile.
- 4 ruote Ø 150 mm, piroettanti, antistriscio e antifilto, a doppio cuscinetto a sfera, di cui 2 frontali con sistema di blocco totale a leva (supporto e ruota) garantiscono perfetta scorrevolezza e maneggevolezza. Portata complessiva del carrello: 300 kg. Diverse dimensioni e peso a seconda del modello: vedi tabella generale pag. 3.

Scarica il testo dal nostro sito:  
[www.francehospital.com](http://www.francehospital.com)

### Un assemblage intelligente de matériaux de qualité.

- Structure autoportante robuste et légère. Combinaison de montants en aluminium anodisé assemblés par le dessus et le dessous par plaque et cadre en acier.
- Parois ( droite, gauche et arrière ) en polystyrolé thermoformé, avec intégration de compartiments pour en réduire l'encombrement.
- Ouverture frontale pour l'intégration des tiroirs ( total de 9 modules ).
- Tiroirs résistants en plastique ABS injecté, poignée sur toute la longueur avec porte-étiquette et tag couleur interchangeable pour l'identification du contenu ( 9 couleurs disponibles ) : rouge, vert, jaune, bleu, violet, gris, orange, rose et blanc. Tiroirs disponibles en 4 hauteurs : 76, 156, 236 et 316 mm.
- Les tiroirs amovibles reposent sur des cadres télescopiques à sortie totale sur glissières afin de faciliter le nettoyage. Les glissières sont équipées de vérins à fermeture automatique avec une charge utile de 45 Kg par tiroir.
- Fermeture centralisée à clé ( ou digicode ) de tous les tiroirs.
- Disponibilité d'une vaste gamme de boîtes de séparation avec séparateurs et porte étiquettes pour une parfaite organisation du contenu des tiroirs, interchangeables et facilement nettoyables.
- Plan de travail en ABS thermoformé antichoc, avec trois bords relevés h. 48 mm et bord avant anti-gouttes, facilement lavable. Hauteur plan de travail : 100 cm, surface utile : voir tableau général page 3.
- Poignées de poussée moulées sur trois côtés, pour une prise en main facile et une bonne manœuvrabilité. Tablette latérale extractible en ABS injecté.
- Dans les versions 400, 600 et 800 le côté gauche intègre 3 bacs basculants en plastique translucide avec ouverture à 30°, amovibles pour le nettoyage.  
>> En alternative étagères intégrées en plastique ABS vert.
- Côté droit prévu pour recevoir de multiples accessoires.
- L'arrière intègre un porte cathéters/sondes avec double ouverture pour les différentes longueurs, un compartiment pour le rangement d'une boîte de gants ( tous deux équipés d'un maintien frontal amovible pour un nettoyage facile ) et d'un emplacement pour une bouteille ou solution hydroalcoolique avec sangle de maintien.
- Base en plastique ABS thermoformé montée sur un cadre en acier, équipée de butées antichocs et facilement nettoyable.
- 4 roues pivotantes Ø 150 mm anti-fils dont 2 à frein, garantissent une parfaite maniabilité du chariot. Charge utile des chariots : 300 kg. Dimensions et poids selon le modèle : voir tableau général page 3.

# Cassetti

## Drawers

### Tiroirs




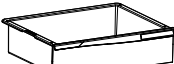
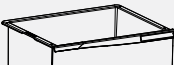
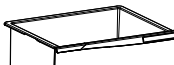
**I cassetti sono in plastica PC/ABS stampata ad iniezione, di colore grigio-perla, hanno la maniglia di presa dalla linea morbida, incorporata al frontalino. Tutti gli angoli sono arrotondati e le superfici lisce per la facile pulizia.**

Sul frontalino sono presenti un largo porta etichette e un tassello colorato intercambiabile per l'identificazione del contenuto. Nove colori disponibili:

**Drawers in PC/ABS injection mold in pearl-gray color, with rounded edges and handles integrated in the front for gripping. All sharp edges or corners are rounded and all surfaces smoothed for easy cleaning.**

On the front there is a wide label holder and an interchangeable colored ID tag for identification of contents. Nine colors available:

**Tiroirs en PC/ABS injecté, de couleur gris perle, sont munis d'une poignée aux lignes courbes en façade.**  
Les façades sont équipées d'un large porte-étiquette et d'une réglette de couleur interchangeable pour l'identification du contenu du tiroir. Coloris disponibles :

Cassetto / Drawer / Tiroir		400	600	400 / 600
Moduli Modules	H mm	mm	mm	Volume (L-ft <sup>3</sup> ) Volume (L-ft <sup>3</sup> ) Capacité ( L-ft <sup>3</sup> )
1 	76 mm (int. 67 mm)	417 x 470	610 x 470	9 / 15
2 	156 mm (int. 146 mm)	417 x 470	610 x 470	21 / 32
3 	236 mm (int. 225 mm)	417 x 470	610 x 470	32 / 50
4 	316 mm (int. 313 mm)	417 x 524	610 x 524	54 / 83

Le guide-quadro a sfera, coperte da un telaio in plastica malva, sono telescopiche, ad estrazione totale, con rientro automatico e ammortizzatore ad aria. Portata 45 Kg. Il cassetto a 4 moduli h. 316 mm ha il frontale in plastica e la struttura in acciaio.

The ball bearing telescopic square rails – covered by a mauve plastic frame, are completely extractable and with self-closing mechanism with air shock absorbers. Maximum capacity 45 Kg. The 4 modules h. 316 mm drawer has a plastic front part.

Les tiroirs sont utilisés sur cadres télescopiques. Capacité 45 Kg. Le tiroir h. 316 mm ( façade ABS et structure acier laqué époxy ).



# L'organizzazione dei cassetti

## Drawers organization

### L'organisation des tiroirs



Combinazioni / Combinations / Combinaisons	
600 mm	400 mm
K6V6-1M / 2M	PC-K1V62V4-1M / 2M
K4V4-1M / 2M	PC-K4V6-1M / 2M
K6V42-1M / 2M	PC-K1V63V42-1M / 2M

Vaschette in plastica ABS colore malva, stampate ad iniezione, disponibili in: due larghezze, due altezze e due lunghezze (26 e 40 cm) consentono oltre una dozzina di combinazioni per organizzare il contenuto dei cassetti in maniera ottimale ed efficiente.

Drawer-bins in injection molded ABS plastic are mauve colored and available in two widths, two heights and two lengths (26 and 40 cm – 7 ¾ and 15 ¾ inches). They can be arranged in more than a dozen combinations to organize the content in a personalized and efficient manner.

Le vaschette sono provviste di divisori regolabili e di originali porta etichette regolabili:

Drawer-bins come with adjustable dividers and label holders:

Bacs tiroirs en ABS injecté de couleur mauve, disponibles en deux largeurs, deux hauteurs et deux longueurs ( 20 et 40 cm ) permettant plus d'une douzaine de combinaisons pour organiser le contenu des tiroirs de manière optimale et efficace.

Séparateurs et porte-étiquettes :



#### Lungh. / Length / Longueur 400 mm

VSC6-1M	vaschetta / bin / bac	
DIV6-1M	divisorio / divider / séparateur	
VSC6-2M	vaschetta / bin / bac	
DIV6-2M	divisorio / divider / séparateur	
VSC4-1M	vaschetta / bin / bac	
DIV4-1M	divisorio / divider / séparateur	
VSC4-2M	vaschetta / bin / bac	
DIV4-2M	divisorio / divider / séparateur	

#### Lungh. / Length / Longueur 260 mm

VSC42-1M	vaschetta / bin / bac	
DIV4-1M	divisorio / divider / séparateur	
VSC42-2M	vaschetta / bin / bac	
DIV4-2M	divisorio / divider / séparateur	

## Accessori per tutti i carrelli

### Accessories for all the trolleys

### Accessoires pour tous les chariots



Supporto orizzontale per 3 scatole guanti  
Triple horizontal wire glove box holder  
Support horizontal pour 3 boites de gants



Asta porta flebo regolabile in altezza a due ganci  
I.V. pole  
Potence télescopique porte sérum



Porta cateteri in griglia d'acciaio inox  
Stainless steel catheter basket  
Porte-sondes



Cestello porta oggetti in griglia d'acciaio inox  
Basket in stainless steel wire mesh  
Panier en acier rilsanisé amovible



Supporto in acciaio plastificato per sacchetti 10 litri  
Light bag-holder - 10 L.  
Collecteur de déchets en fil d'acier inoxydate 10 L




Barra accessori laterale  
Lateral accessory rail  
Rail latéral normalisé porte-accessoires



Cestino rifiuti doppio con supporto  
Twin Trash bins with support  
Collecteur de déchets double en plastique



MAXIWALLY, raccogliatore con apertura a ginocchio, 20 litri  
MAXIWALLY trash bin - large size  
MAXIWALLY, ouverture par pression du genou, 20 L

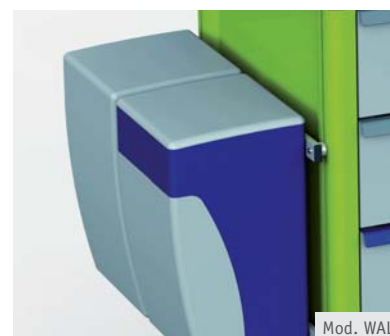

WALLY, raccogliatore con apertura a ginocchio, 8 litri  
WALLY trash bin - small size  
WALLY, ouverture par pression du genou, 8 L



Cestello porta rifiuti in tondino inox, 10/20 L e 30 L  
Wire waste-bag holder 10/20 L and 30 L  
Collecteur de déchets en fil d'acier rilsanisé 10/20L - 20/30 L





Mod. PCMSC

Set 2 cassettei in plastica rossa  
con coperchio trasparente  
2 plastic bins with lids  
Set de 2 boîtes de rangement  
avec couvercles



Mod. PCMBC54

Cassettini in plastica disposti  
su due file  
Syringe/needles dispenser  
Distributeur de seringues et d'aiguilles



Mod. PCMMI2

Mensola in acciaio inox  
con tre divisori in plastica  
Stainless steel tray  
Etagère en acier inoxydable avec 3  
séparateurs en plastique




Mod. VA

Mensola in plastica  
Plastic tray – large size  
Bac/Etagère moulé



Mod. VA-D

Mensola in plastica con tre  
divisorie sagomate  
Plastic Tray  
Etagère moulée avec 4 compartiments

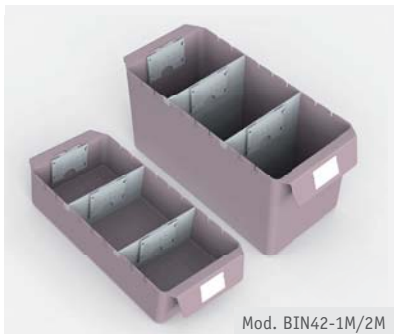

Mod. BIN42-1M/2M

Vaschette da agganciare alla barra  
Supply bins  
Bacs à accrocher sur rail normalisé



Mod. SPG-T2

Supporto scatola guanti  
Glove box holder  
Support boîte à gants



Mod. PCMF

Porta flebo a due ganci  
I.V. hook  
Support porte sérum



Mod. PCMA

Supporto bacinella reniforme  
Kidney dish holder  
Support haricot



Mod. PCMVD

Vaschetta per disinfezione strumenti,  
con griglia interna amovibile e  
coperchio  
Instrument disinfectant basin  
Support et bac de décontamination

# Accessori per tutti i carrelli

## Accessories for all the trolleys

### Accessoires pour tous les chariots



Mod. PCMDS

Dispenser disinfettante  
Disinfectant dispenser  
Distributeur de solution  
hydroalcoolique



Mod. PCMPBC

Eragotore per bicchieri  
Cups dispenser  
Distributeur de gobelets



Mod. SUPUN

Supporto universale per contenitore  
taglienti  
Sharp container holder  
Support collecteur DASRI



Mod. PCMG

Instrument hook  
Gancio inox porta strumenti  
Crochet porte instrument



Mod. PCMPRC

Tape dispenser  
Porta cerotti  
Distributeur d'étiquettes



Mod. PCMPC

Supporto per computer laptop  
Laptop PC holder  
Support PC portable



Mod. UCBC

Bacinella inox Ø 150x70 h. mm  
Stainless steel basin Ø 150x70 h. mm  
Récipient en acier inoxydable  
Ø 150x70 h. mm



Mod. BRT

Bacinella inox rettangolare  
295x235x50 h. mm  
Stainless steel bin 295x235x50 h. mm  
Récipient rectangulaire en acier  
inoxydable 295x235x50 h. mm



Mod. LUP1

Piccola luce notturna da fissare  
alla barra o al tubo  
Night light with clamp  
Lampe à fixer sur tube ou réhausse



Mod. APVD

Tubo verticale in acciaio inox Ø 25 x h.  
300 mm, per fissaggio accessori  
Vertical accessory tube Ø 25x300 h. mm  
Tube en acier inoxydable permettant la  
fixation d'accessoires



Mod. TPC-CL  
 Contenitore in plastica  
 per ca. 10 cartelle A4  
 Plastic box for 10 hanging charts A4  
 size  
 Porte-dossiers suspendus A4 amovible -  
 petite capacité




Mod. CPC  
 Cassetto 4 moduli per cartelle A4  
 Drawer for hanging charts A4 size -  
 h. 315 mm  
 Tirorir porte-dossiers suspendus A4 h.  
 315 mm



Mod. PCVSPCAN  
 Telaio per ca. 10 cartelle A4  
 Steel frame for hanging charts A4 size  
 Porte-dossiers suspendus filaire A4  
 amovibile



Mod. NS  
 Cassetta narcotici con chiave,  
 per cassetto  
 Narcotic safe with key-lock, for drawer  
 Coffre à toxiques

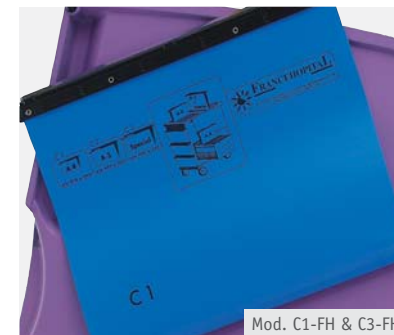

Mod. C1-FH & C3-FH  
 Cartella sospesa mm 318x245 (DIN A4)  
 e mm 465x39 per lastre  
 Hanging charts A4 & X-rays /  
 foolscap sizes  
 Dossier suspendu A4 en polypropylène  
 haute densité et dossier suspendu  
 format radiographie



Mod. PT-xxx  
 Copertura piano lavoro in PVC  
 Clear top mat for worktop  
 Plaque en PVC cristal pour protéger le  
 plan de travail



Mod. PI-xxx  
 Lastra in acciaio inox per protezione  
 piano di lavoro  
 Stainless steel plate to protect worktop  
 Plaque en acier inoxydable pour  
 protéger le plan de travail



Mod. UCPF  
 Porta flaconi a quattro fori Ø 80 mm  
 Bottle holder - 4 holes Ø 80 mm  
 Porte-flaque 4 trous Ø 80 mm



Mod. CL1000SG  
 Serratura elettronica digitale  
 Electronic keypad lock  
 Digicode



Grafica pediatrica in 4 fantasie:  
 zoo, bambini, acquario, pompieri  
 For paediatric wards : fantasy graphics  
 Décor pédiatrique





[www.francehopital.com](http://www.francehopital.com)  
[www.francehopital.fr](http://www.francehopital.fr)

**FRANCEHOPITAL S.A.S.**

*Z.I. Ouest Rue Georges Besse  
B.P. 50030  
F-67151 ERSTEIN Cedex / FRANCE  
Tél. +33 03 88 59 87 87  
Fax +33 03 88 98 04 44  
[francehopital@francehopital.fr](mailto:francehopital@francehopital.fr)*

*Export Office / Ufficio Commerciale Italia  
Zona Industriale, 11  
I-39011 Lana / BOLZANO - ITALY  
Tel. +39 0473 55 26 11  
Fax +39 0473 55 26 99  
[export@francehopital.com](mailto:export@francehopital.com)  
[italia@francehopital.com](mailto:italia@francehopital.com)*

*Ci riserviamo di apportare le opportune modifiche tecniche e/o estetiche ai prodotti, senza alcun preavviso.*

*We reserve the right to change our products and their specifications at all times for technical or esthetical reasons, without prior notice and without obligation to report the change.*

*Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos produits et leurs spécifications à tout moment, pour des raisons techniques ou esthétiques, sans obligation de mentionner ces changements.*

**francehopital®**  
trolleys for healthcare