

# Medicijndistributie



**Medimpex**  
care solutions



# Medicijndistributie en opbergssystemen

Medimpex Care Solutions is importeur en indirect producent van innovatieve producten ten behoeve van de totale zorgsector. Door jarenlange opgebouwde kennis en ervaring kunnen wij onze klanten goed adviseren en begeleiden.

Een van onze speerpunten is om mee te denken in het aanbieden van oplossingen ten behoeve van (veilige) medicijndistributie en de opslag van medicatie en verbandmiddelen.

## ***Veilige medicijndistributie begint bij een goed systeem***

Medicijnen dienen veilig, zorgvuldig en overzichtelijk bewaard te worden. Onze systemen maken dit mogelijk en kunnen worden voorzien van diverse indelingen op een medicijnwagen. Met behulp van individuele medicijnlaatjes in gescheiden compartimenten of met individuele medicijnbakjes in een telescooplade wordt vrijwel altijd een veilige en werkbare oplossing bereikt. Veel van onze systemen zijn ook uitwisselbaar met medicijnkasten.

Alle medicijnwagens, medicijnkasten, koelkasten, opiatenkastjes en retourmedicatie opbergkastjes zijn in de basis uitgevoerd met een sleutelslot. Optioneel is het mogelijk om te werken met een cijfercodeslot of met een meer geavanceerd pas-systeem zoals in geautoriseerde toegangsruimten wordt toegepast.

Al onze medicijnwagens zijn geschikt voor het werken met medicijnrollen op basis van het baxtersysteem.

## ***Samenwerking en maatwerk***

Door een nauwe samenwerking met onze fabrikanten en toeleveranciers is Medimpex in staat om oplossingen in eigen beheer te fabriceren. Hierdoor is het mogelijk om een assortiment aan te bieden, dat veel verder reikt dan wat we via onze standaard verkoopkanalen aanbieden.

Medimpex is importeur en exclusief dealer van het Italiaanse merk **Francehospital** en het Spaanse merk **KRZ**.

Daarnaast voeren we in eigen beheer een exclusieve lijn medicijnwagens en kasten, genaamd **Medimpex Care Design**, die goed aansluit op de behoeften in de markt naar een design met een meer huiselijk karakter.

Door middel van een nauwgezette inventarisatie, waarin elke medicatieverantwoordelijke zijn/haar individuele wens kenbaar maakt, streven wij altijd naar de gewenste en veilige oplossing met het juiste resultaat.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw vraag of wens. Grote kans dat wij u van dienst kunnen zijn!

## Medicijnwagens Baxtergeschied van KRZ

Al sinds het ATC / Baxtersysteem in Nederland op de markt is biedt Medimpex Care Solutions ATC / Baxter geschikte medicijnwagens aan, de KI-serie van KRZ.



Bij dit systeem wordt de medicatie door de apotheek verpakt in zakjes per inname moment, per dag. Dit wordt aangeleverd op een rol. Per inname moment is er een apart zakje. Dat is vooral een uitkomst als mensen meerdere geneesmiddelen op verschillende momenten moeten gebruiken en zich later niet meer kunnen herinneren of ze hun medicijnen wel of niet hebben ingenomen.

Baxter medicijndistributie is in veel instellingen gebruikelijk. De wagens van Medimpex worden speciaal ingericht voor ATC / Baxter. Later kan men met een ATC / Baxter wagen (zonder extra hoge kosten) ook overstappen op een ander medicijndistributiesysteem. De ATC / Baxter wagens van Medimpex Care Solutions zijn beschikbaar in een wagen met uitwisselbare en afsluitbare medicatie cassetteboxen. Dit maakt het systeem heel flexibel inzetbaar.




Wat de beste oplossing is, hangt vooral af van het aantal patiënten of cliënten waarvoor deze is bedoeld. Ook is dit systeem te combineren in bijvoorbeeld een medicijn / instrumenten wagen.



De wagens zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en kleurstellingen.

Doordat zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde cassetteboxen kunnen worden geplaatst, heeft u de beschikking over 9 tot 36 individuele medicijnlaattjes.

Naast de 3L medicijnlaattjes is het ook mogelijk om te werken met ruimere 4.5L laattjes of een combinatie van beide opbergcapaciteiten.

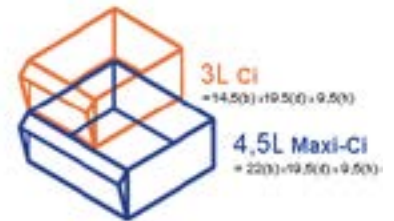

Beide type laattjes zijn geschikt voor baxterrollen, maar bieden daarnaast ook ruimte voor overige medicatie, zoals tubes, potjes, doosjes en flacons. Alle laattjes kunnen flexibel middels verdelers worden ingedeeld. De grotere soft-close lades onderin de medicijnwagen lenen zich uitstekend voor het bergen van bulkmedicatie, grotere flacons of een apart opiatenkluisje.



Hierdoor heeft u een uniek systeem met voor iedere cliënt een individuele lade, in gescheiden compartimenten, waardoor de kans op vergissingen bij het delen van medicatie tot een minimum wordt gereduceerd.

De medicijnlaatjes in de cassettebox zijn standaard voorzien van een centrale vergrendeling, optioneel zijn deze medicijnwagens ook elektronisch sluitend uit te rusten (met een tag).

Bij de KI medicijnwagens kan, na het uitnemen van één of meerdere laatjes uit de medicatie cassettebox, de box alsnog veilig met de nog resterende laatjes worden vergrendeld.



De cassettebox is ook los verkrijgbaar voor gebruik in een (keuken)kast bijvoorbeeld. Ook zijn losse cassetteboxen inzetbaar bij een medicatie uitwisselsysteem met bijvoorbeeld de (ziekenhuis)apotheek. De cassettebox wordt dan compleet omgeruild op locatie en is al ingedeeld door de apotheek.

Afhankelijk van het aantal gekozen medicijnlaatjes en de hoogte van de onderladen, is de KI-wagen leverbaar in hoogtes tussen 100 cm en 120 cm. Hierdoor blijven de wagens binnen de "Arbonorm".

De KI-Color serie is in diverse kleuren van de omkasting leverbaar en is standaard al voorzien van een aan de zijwand neerklapbaar werkblad, een flessen- en naaldcontainerhouder en een afvalbakje.

Diverse accessoires zijn aan de wagen toe te voegen, denk hierbij aan een naaldcontainerhouder, handschoenendooshouder, vloeistofdispenser en bijvoorbeeld een tabletarm of laptoparm.

*Vraag naar de mogelijkheden.*



*Leverbaar in de kleuren:*



## Medicijnwagen Multifunctioneel Preciso



Preciso medicijnwagens zijn multifunctioneel inzetbare wagens, geschikt om op een overzichtelijke en veilige manier medicatie te delen, maar ook zeer geschikt om als wondverbandkar in te zetten. Ze zijn eenvoudig uit te breiden en in te richten met functionele en variabele indelingen en diverse accessoires.

Dit type wagen is robuust door de stootrand rondom, zowel aan onder- als bovenzijde, alsmede de geïntegreerde duwbeugel. Met 4 dubbele zwenkwielen, waarvan 2 met voetrem.

Uitgangspunt is altijd brede/diepe lades waarin door middel van inzet trays of verdeelsets een afscheiding te maken is. Hiermee zijn veel flexibele indelingen mogelijk. De lades zijn uitneembaar en hierdoor zeer geschikt voor reiniging of uitwisseling binnen hetzelfde multifunctionele systeem.

De Preciso medicijnwagen is in verschillende hoogtematen leverbaar van 840 tot 1080 mm. De breedte is altijd 830 mm en de diepte altijd 650 mm. Hiermee is het een vrij compacte en functionele medicijnwagen.

De medicijnwagen is uit te rusten met lades inclusief een telescopische geleiding of lades in een ISO-rasterwand systeem. De lades zijn in vier verschillende hoogtes te verkrijgen, namelijk 76, 156, 256 en 316 mm. De lades kunnen met een langs- en dwarsverdeling of kant-en-klaar inzet trays ingedeeld worden. Met inzetbare verdelers en labelhouders per tray kan een verdere verdeling naar wens gemaakt worden.



Middels een vernuftig rail-klik-systeem kunnen diverse accessoires aan weerszijden van de wagen worden toegevoegd. Denk hierbij aan een knie-bedienbare afvalbak, naaldcontainerhouder, handschoendooshouder, handdesinfectiepompje of afvalbakje t.b.v. verbruikte Baxterzakjes.

Daarnaast is het ook mogelijk om een opbouw t.b.v. accessoires zoals een infuusstandaard, tablet- en/of laptopouder voor het digitaal registreren van medicatie toe te passen.

De multifunctionele **Preciso** is ook verkrijgbaar in een smallere variant als multifunctioneel model **Presto** met hetzelfde systeem van trays en diverse accessoires.

## Medicijnwagen Preciso met rolluik


Preciso medicijnwagens zijn multifunctioneel inzetbare wagens die uit te breiden en in te richten zijn met functionele/variabele indelingen en diverse accessoires.

Net als de ladewagens zijn deze wagens goed afsluitbaar door een centraal slotsysteem in standaard sleutelslotuitvoering of indien gewenst met een elektronisch (code)slotsysteem. Vraag naar de mogelijkheden. Maar nu met een makkelijk beweegbaar rolluik, met in het midden een ergonomische handgreep.

De Preciso medicijnwagen met rolluik is in verschillende hoogtematen te leveren, namelijk 1020, 1100 en 1180 mm. De breedte is 830 mm en de diepte 650 mm. Hiermee is het een compacte en functionele medicijnwagen.



Leverbaar in de kleuren:

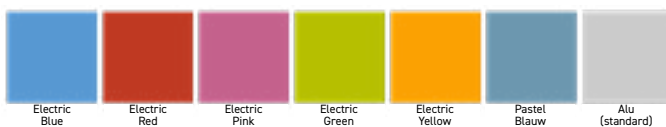

De wagens zijn goed afsluitbaar door een centraal slotsysteem in standaard sleutelslotuitvoering of indien gewenst met een elektronisch (code)slotsysteem.

Vraag naar de mogelijkheden.



Niet toepasbaar op wagen met rolluik

## Medicijnwagen Multifunctioneel Presto

Presto medicijnwagens zijn multifunctioneel inzetbare wagens die uit te breiden zijn met diverse accessoires. Het is de compactere variant van de Preciso en in meerdere uitvoeringen en breedtes verkrijgbaar. De kleinste variant heeft een breedte van 571 mm.

Alle accessoires en tray indelingen voor de lades zijn uitwisselbaar met de Preciso medicijnwagens.

De medicijnwagen is uit te rusten met lades inclusief een telescopische geleiding of lades in een ISO-rasterwand systeem.

De lades zijn in vier verschillende hoogtes te verkrijgen, namelijk 76, 156, 256 en 316 mm. De lades kunnen met een langs- en dwarsverdeling of kant-en-klare inzet trays ingedeeld worden. Met inzetbare verdelers en labelhouders per tray kan een verdere verdeling naar wens gemaakt worden.

Ook verkrijgbaar in een bredere variant met uittrekbaar werkblad en kantelbakken of verdiepte schappen aan de zijkant.



Uitgangspunt is altijd brede/diepe lades waarin door middel van inzet trays of verdeelsets een afscheiding te maken is. Hiermee zijn veel flexibele indelingen mogelijk. De lades zijn uitneembaar en hierdoor zeer geschikt voor reiniging of uitwisseling binnen hetzelfde multifunctionele systeem.

## Verbandwagen Multifunctioneel Presto

De wagens zijn goed afsluitbaar door een centraal slotsysteem in standaard sleutelslotuitvoering of indien gewenst met een elektronisch (code)slotsysteem.

*Vraag naar de mogelijkheden.*

De Presto verbandwagen is in alle drie de breedte varianten te verkrijgen en in hoogtemaat 1050 mm leverbaar. De diepte van de wagen is 594 mm. en dus zeer compact.

Er kunnen diverse accessoires worden toegevoegd, zoals een naaldcontainerhouder, handschoenenhouder, desinfectiepompje of handig led nachtlampje.

Ook verkrijgbaar in een bredere variant met uittrekbaar werkblad en kantelbakken of verdiepte schappen aan de zijkant.



*Leverbaar in de kleuren:*



De wagens zijn goed afsluitbaar door een centraal slotsysteem in standaard sleutelslotuitvoering of indien gewenst met een elektronisch (code)slotsysteem.

*Vraag naar de mogelijkheden.*



## Crashkar / emergency carts

In spoedsituaties telt iedere minuut. Medicatie, hulpmiddelen en apparatuur moeten direct beschikbaar zijn, zonder dat een hulpverlener ernaar moet zoeken.

Een crashkar heeft een standaardinrichting afgestemd op de meest voorkomende noodsituaties. Een dergelijke standaardinrichting wordt inmiddels in ruim 80% van de ziekenhuizen gebruikt.



De crashkarren van Medimpex zijn zo ontwikkeld, dat er diverse medicamenten en materialen van verschillende groottes in kunnen worden opgeborgen op een praktische en veilige manier. Uitgevoerd met telescopisch uittrekbare lades.

Uit te voeren met diverse accessoires. Meerdere mogelijkheden voor een hartmassageplank. Flexibele indelingsmogelijkheden. Wagens verkrijgbaar in diverse breedtes en materialen.

### Beveiliging:

Bij elke ingebruikname wordt door middel van een breekzegel met een uniek nummer de crashkar geopend. Na gebruik wordt middels een controlelijst de wagen weer aangevuld en wordt een nieuw breekzegel aangebracht.



## Medimpex Care Design

*In ruimtes, waar men voor de leefomgeving van zorgbehoeftige bewoners een huiselijke sfeer wil creëren met een herkenbare inrichting, biedt Medimpex ook een passende oplossing met huiselijke uitstraling. Uiteraard staat, evenals bij de andere medicijn verdeelsystemen, de veiligheid voorop.*



### Medicijnwagens

Onze multifunctioneel inzetbare houtbouw wagens hebben een huiselijke uitstraling en zijn geschikt voor de opslag van medicatie, maar ook goed inzetbaar als verbandkar binnen zorginstellingen en kleinschalige woonzorg concepten.

Deze productlijn wordt in eigen beheer vervaardigd met een breed spectrum aan specifieke mogelijkheden en wensen qua indelingen. Het is mogelijk om de medicijnkar geheel op maat samen te stellen en in te delen.

De wagens worden vervaardigd van hoogwaardig plaatmateriaal met een krasbestendige toplaag, die goed te reinigen is met de meest voorkomende reinigingsmiddelen.

De 220-270 graden draibare deuren zijn vast te zetten aan de buitenzijde van de wagen middels magneten en zorgen ervoor dat de inhoud goed uitgenomen kan worden.

Huiselijke medicijnwagens worden geproduceerd op basis van de standaard beschikbare 600x400 mm ISO maat.





Door de toepassing van profielwanden aan de binnenzijden van de wagen is deze volledig naar eigen wens in te richten met ISO modules (60-40 verhouding) en legplateaus t.b.v. cliëntmedicatie met individuele bakjes per cliënt. Voor het veilig opbergen van opiaten zijn ook meerdere oplossingen mogelijk, zoals een telescopische lade direct onder het werkblad.

De wagens zijn standaard voorzien van 4 zwenkwielen  $\varnothing 125$  mm waarvan 2 geremd. Het loopvlak van de wielen is van polyamide en laat geen strepen na.



Er kunnen diverse accessoires worden toegevoegd, zoals o.a. een naaldcontainerhouder, handschoenenhouder, desinfectiepompje maar ook een afsluitbaar retourmedicatiebakje.

Daarnaast is het mogelijk een zwenkarm met iPad- of laptopouder op de medicijnwagen te bevestigen, wat de digitale registratie aanzienlijk vergemakkelijkt.

Diverse kleurstellingen zijn mogelijk.

Leverbaar in de kleuren:



De wagens zijn goed afsluitbaar door een centraal slotsysteem in standaard sleutelslotuitvoering of indien gewenst met een elektronisch (code)slotsysteem afgestemd op het binnen de organisatie in gebruik zijnde toegangssysteem.

Vraag naar de mogelijkheden.



## Medimpex Care Design

*In ruimtes, waar men voor de leefomgeving van zorgbehoeftige bewoners een huiselijke sfeer wil creëren met een herkenbare inrichting, biedt Medimpex ook een passende oplossing met huiselijke uitstraling. Uiteraard staat, evenals bij de andere medicijn verdeelsystemen, de veiligheid voorop.*



### Kasten, wandkasten en dossierkluisjes

Onze houtbouw kasten en wandkasten hebben een huiselijke uitstraling en zijn geschikt voor de opslag van verbandmiddelen en medicatie, zowel op individueel cliënt-niveau, als voor de gehele zorglocatie.

Ook deze productlijn wordt in eigen beheer vervaardigd met een breed spectrum aan specifieke mogelijkheden en wensen qua indelingen. Het is mogelijk om de medicijnkast geheel op maat samen te stellen.

De kasten worden vervaardigd van hoogwaardig plaatmateriaal met een krasbestendige toplaag, die goed te reinigen is met de meest voorkomende reinigingsmiddelen.

Onze huiselijke medicijnkasten kunnen worden ingedeeld op basis van de standaard ISO 600x400 mm maat en zijn er in twee standaard hoogtematen 2100 mm en 1500 mm.



Hoge kast 2100 mm



Middelhoge kast 1500 mm

Alle huiselijke kasten zijn standaard voorzien van grote handgrepen voor een optimale grip.

De wandkasten en dossierkluisjes kunnen worden uitgerust met legschappen en/of aparte cliënt medicatievakken.



De kasten zijn goed afsluitbaar door een centraal slotsysteem in standaard sleutelslotuitvoering of indien gewenst met een elektronisch (code)slotsysteem.

*Vraag naar de mogelijkheden.*



## Medicijn/Verbandkasten voor modulair opbergsysteem

Deze kasten zijn geschikt voor het Flexmodul opbergsysteem. Een zeer compleet en flexibel systeem dat in veel zorginstellingen wordt gebruikt. Hierdoor zijn de kasten in te delen met verschillende accessoires waarbij u zelf de indeling bepaalt.

De modulaire kasten kunnen voor meerdere doeleinden worden ingericht.

Of het nu gaat om de opslag van (cliënt)medicatie, opiaten en overige voorraad of voor de opslag van verbandmiddelen, katheters, steriele hulpmiddelen e.d., onze modulaire kasten bieden een flexibele en degelijke oplossing.

### Eigenschappen:

- Stootvast door toegepaste materialen en constructie.
- Kast zijn afsluitbaar met een grote diversiteit aan slotoplossingen.
- Modulaire ISO maat van 600x400 mm of 300x400 mm geschikt.
- Voor toepassing in kleine ruimtes is er ook een rolluik variant beschikbaar.
- In diverse hoogtes en breedtes samen te stellen.

Wilt u weten of dit type kast ook geschikt is binnen uw (werk)omgeving?

Laat u dan vrijblijvend adviseren door onze adviseurs en vraag naar de mogelijkheden.



Verbandkasten moeten hygiënisch en steriel zijn, zodat zij geen besmettingsgevaar vormen voor de te behandelen cliënten. Verband en andere medicatie moeten er veilig in kunnen worden opgeborgen, maar ook snel eruit gehaald kunnen worden. Dit vereist een praktische indeling van de kast.



In te richten met diverse modules en medicijnbakken.  
*Vraag naar de mogelijkheden.*

De verbandkasten hebben mooi afgewerkte zichtbare zijden, zodat ze in ieder interieur geplaatst kunnen worden. De hoogte van de kast bedraagt 2100 mm, een breedte van 454 of 654 mm en een diepte van 660 of 460 mm, afhankelijk van de opstelling.

De modulaire kasten zijn standaard leverbaar in wit/lichtgrijs. Vraag naar de mogelijkheden voor andere kleurstellingen.

## Medicijnkast met draaideuren

Om medicijnen verantwoord, veilig en praktisch op te bergen, vindt u in ons assortiment verschillende medicijnkasten met specifieke eigenschappen.

Dit type draaideur medicijnkast laten wij in eigen beheer maken in standaard witte kleurstelling en verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes, te weten 800 mm, 1000 mm en 1200 mm. Afwijkende maatvoeringen en kleuren zijn in onderlinge afstemming ook mogelijk.

Deze draaideurkast is standaard uitgerust met een uittrekbaar werkblad en een legschap voor verdere indeling.



In te delen met diverse medicijnbakken.  
*Vraag naar de mogelijkheden.*



De kasten zijn goed afsluitbaar door een centraal slotsysteem in standaard sleutelslotuitvoering of indien gewenst met een elektronisch (code)slotsysteem.

*Vraag naar de mogelijkheden.*

## Medicijnkast met elektrisch rolluik

Wanneer de ruimte voor opslag van medicijnen beperkt is, biedt de elektronisch bediende jaloezie medicijnkast een oplossing.

Standaard is de rolluikkast uitgerust met een uittrekbaar werkblad en legschap. Verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes, te weten 800 mm, 1000 mm en 1200 mm.

De bediening van het stevige elektrische rolluik vindt plaats met behulp van een sleutel schakelaar. Arbo-technisch is dit dus een prima ruimtebesparende oplossing.

Leverbaar in standaard wit en aan te sluiten op een standaard 220/230V aansluiting.



In te delen met diverse medicijnbakken.  
*Vraag naar de mogelijkheden.*



## Medicijnkoelkasten

Bij het bewaren van medicijnen en vaccins kan de juiste temperatuur, en dus een betrouwbare medische koelkast, van essentieel belang zijn. Er is een aantal redenen om te kiezen voor een professionele medicijnkoelkast in plaats van een standaard witgoed/keukenkoelkast.

In een standaard koelkast heeft niet de gehele koelkast dezelfde temperatuur. Het kan tegen de achterwand tegen het vriespunt zijn en op hetzelfde moment boven in de koelkast wel 10 graden. Een groot verschil dus. Bij een medicijnkoelkast is de temperatuur overal in de koelkast gelijk.

Bij een medicijnkoelkast kan de fabrikant de gewenste minimum- en maximumtemperatuur nauwkeurig instellen binnen een range van +2 tot +8 graden.

Een medicijnkoelkast is voorzien van een alarmsysteem. Mocht er een stroomstoring optreden waardoor de temperatuur oploopt, dan treedt een optisch en een akoestisch alarm in werking.



Een medicijnkoelkast is duurder dan een normale koelkast. Dit komt vanwege de zeer nauwkeurige geavanceerde temperatuur regelaar en de verschillende materialen (isolatie) die aangebracht zijn om de medicijnkoelkast aan de norm te laten voldoen.

Een te warme of juist te koude temperatuur kan medicijnen onbruikbaar maken.

Met een medicijnkoelkast houdt u temperatuurgevoelige medicijnen op de juiste temperatuur. Ons assortiment medicijnkoelkasten bestaat uit medicijnkoelkasten voor langdurige opslag in diverse maatvoeringen.



We werken met gerenommeerde A-merken als Liebherr, Dometic en Kirsch omdat bij temperatuurgevoelige medicatie een betrouwbare en stabiele opslag essentieel is.



## Opiatenkastjes

De door ons geleverde opiatenkastjes kunnen in vrijwel alle medicijnkasten worden ingebouwd.  
De opiatenkastjes zijn voorzien van boorgaten en kunnen op elke gewenste plaats worden gemonteerd en vastgezet.

Voor de veilige opslag van medicijnen die nog meer aandacht vragen, is dit een goede oplossing. De opiatenkastjes zijn vervaardigd van staal en afgewerkt met een poedercoating.

Speciaal voor de toepassing in lades van medicijnwagens hebben onze opiatenkastjes een naar boven openend deksel met klepscharnier.

De sloten op opiatenkastjes moeten een andere sleutel of toegangscode bevatten dan de kast/wagen waarin deze geplaatst zijn.  
Alle opiatenkastjes zijn verkrijgbaar met sleutelslot of een cijfercode slot.  
Op enkele uitvoeringen kunnen ook elektronische sloten, waaronder Salto, gemonteerd worden.

Vraag naar de mogelijkheden.

### OPI-ME1

■ Afmeting 100x250x230 mm (HxBxD)



### OPI-ME2

■ Afmeting 192x250x225 mm (HxBxD)



### OPI-ME3

■ Afmeting 190x370x330 mm (HxBxD)



### OPI-EL met elektronisch cijferslot

■ Afmeting 250x350x250 mm (HxBxD)



### PRE-NS en PRE-NS175 t.b.v. lades in medicijnwagens

■ Afmeting 340x200x100/175 mm (BxDxH)



## Medicatie retourboxen

Om de medicatieveiligheid te waarborgen is het belangrijk dat overtollige en/of niet meer te gebruiken geneesmiddelen in zorginstellingen op een verantwoorde en veilige manier worden opgeslagen alvorens deze retour gaan naar de apotheek.

Hiervoor heeft Medimpex Care Solutions medicatie retourboxen ontwikkeld in verschillende afmetingen. Deze metalen afsluitbare medicatie retourboxen zijn voorzien van een kanteldeksel waarin geneesmiddelen gedeponeerd kunnen worden, maar niet meer uitgehaald kunnen worden als u niet in het bezit bent van de sleutel.

De medicatie retourboxen zijn eenvoudig te verplaatsen door ze op te tillen. Ook kunt u er voor kiezen om een box op te hangen. Deze kan dan alleen nog maar van de wand afgehaald worden indien u in het bezit bent van de sleutel.

### Model 1 Type 308.62

■ Afmeting 600x500x370 mm (HxBxD)

Veilige kanteldeksel. Medicatie kan er wel in, maar niet meer uit.

Ook voor grotere verpakkingen en flesjes.

Uitneembare kunststof box, zodat de gehele inhoud direct kan worden meegenomen.



### Model 2 Type 308.61

■ Afmeting 320 x 380 x 230 mm (hxbxd).

Inworp gleuf 150x20 mm met extra plaat aan de binnenzijde.

Medicatie kan er wel in, maar niet meer uit.

Voor medicijn strips en overige smalle verpakkingen.

Uitneembare kunststof box met afsluitdeksel, zodat de gehele inhoud direct kan worden meegenomen en worden omgewisseld met bijvoorbeeld de apotheek.



### Model 3 Type 308.59

■ Als model 1 maar dan in de afmeting 960x500x370 mm (HxBxD)

Veilige kanteldeksel. Medicatie kan er wel in, maar niet meer uit.

Ook voor grotere verpakkingen en flesjes.

Uitneembare kunststof box, zodat de gehele inhoud direct kan worden meegenomen.



Op aanvraag is bij bepaalde aantallen ook maatwerk mogelijk. Graag bekijken we samen met u de mogelijkheden.

### Type AL920001200

■ Afmeting 280 x 180 x 70 mm

Om volgens de AVG richtlijnen de verbruikte baxtermedicatie zakjes af te voeren is er een compacte afsluitbare box beschikbaar.

Deze kan op al onze medicijnwagens worden bevestigd.



## Wandkastjes vervaardigd uit staal

Deze medicijnkasten kunnen worden ingericht met diverse medicijn- of voorraadbakken en eventueel een opiatenkastje. Ze zijn standaard afsluitbaar met een cilinderslot.

Uit te voeren in :

**Type 308.58** model met één legschap en een opiatenkastje

**Type 308.57** model met drie verstelbare legschappen

**Type BMK4** model met cijfercombinatieslot

**Type MK3** model met dossiervak en opiatenlade

De afmetingen zijn:

**Type 308.58** en **type 308.57**

Hoogte: 600 mm | Breedte: 450 mm | Diepte: 380 mm

**Type BMK4**

Hoogte: 360 mm | Breedte: 250 mm | Diepte: 120 mm

**Type MK3**

Hoogte: 500 mm | Breedte: 380 mm | Diepte: 350 mm



**Type 308.58** model met één legschap en een opiatenkastje



**Type 308.57** model met drie verstelbare legschappen



**Type BMK4** model met cijfercombinatieslot



**Type MK3** model met ruimte voor dossiervak, baxtervakje en een separaat opiatenlaatje

Type 308.57 en 308.58 zijn ook uit te rusten met medicijnbakken MB3010 en MB3020.



MB3010



MB3020

## Baxterrol dispensers



De baxterroldispensers of medicijndispensers zijn gemaakt van (duurzaam) transparante kunststof dat hygiënisch en eenvoudig in gebruik is.

De recyclebare baxterroldispensers van Medimpex zijn ook geschikt voor gebruik in combinatie met de multifunctionele medicijnwagens Preciso en Presto.

- De zakjes kunnen gemakkelijk van de baxterrol worden afgescheurd.
- De rol wordt op zijn plaats gehouden door een speciale clip.
- Vervaardigd uit duurzaam en hygiënisch kunststof.
- Zowel in standaard capaciteit van ca 100 mm doorsnede als in een grotere variant van ca 180 mm doorsnede verkrijgbaar.
- In transparant en donkerblauw verkrijgbaar (variant 100 mm doorsnede).
- Mogelijkheid tot eigen opdruk (vanaf een bepaalde oplage, vraag naar de mogelijkheden).



## Medicijnvermaler Silent Knight

In alle zorginstellingen worden regelmatig medicijnen vermalen, omdat deze in gemalen vorm beter kunnen worden toegediend. Dit is vooral van toepassing bij mensen met slikproblemen of mensen die hun voeding toegediend krijgen door middel van sondevoeding.

De Silent Knight medicijnvermaler kan met één simpele handbeweging medicijnen vermalen in daarvoor speciaal vervaardigde stevige zakjes (niet geschikt voor Baxterzakjes).

Deze handbediende medicijnvermaler heeft een aantal voordelen ten opzichte van het handmatig vermalen van medicijnen met andere apparaten.

- RSI gerelateerde klachten worden tot een minimum beperkt.
- Vereist nauwelijks kracht en is tijdbesparend.
- Compact en handzaam design.
- Mate van verpulvering zelf te bepalen.
- De Silent Knight is stabiel en kan op iedere medicijnwagen worden gebruikt.



## Medicijnvermaler Severo

In alle zorginstellingen worden regelmatig medicijnen vermalen, omdat deze in gemalen vorm beter kunnen worden toegediend. Dit is vooral van toepassing bij mensen met slikproblemen of mensen die hun voeding toegediend krijgen door middel van sondevoeding.

Om het vermalen van medicatie nog makkelijker te maken is de Severo elektrische medicijnvermaler ontworpen. Medicatie wordt in slechts acht seconden moeiteloos verpulverd. Ideaal voor in zorgcentra, ziekenhuizen en thuiszorg.

- Vermaling van pillen in enkele seconden, met daarvoor bestemde medicijnbekertjes met gekartelde bodem.
- Géén blootstelling aan medicatiestof (aerosolen).
- Voorkomt kruiscontaminatie.
- Voorkomt RSI gerelateerde klachten.
- Compact en geschikt voor gebruik in/op alle medicijnverdeeltaggen in combinatie met een magneetplaat (optioneel).
- Ideaal voor toediening bij sondevoeding.
- Praktisch geluidloze vermaling.
- Krachtige (Lithium-ion) accu met lange levensduur.



## Slikgel (t.b.v Severo medicijn vermaler)

De Severo Slikgel is een uniek product omdat bij het innemen van pillen, capsules en poeders het doorslikken wordt vergemakkelijkt en tegelijkertijd de bittere smaak wordt gemaskeerd.

De slikgel is verkrijgbaar in knijptube of in een praktische fles met doseringspompje.

- Vergemakkelijkt het doorslikken van tabletten en poeders.
- Maskeert de bittere smaak van medicatie.
- Heeft geen negatief effect op de opname van medicatie door het lichaam.
- Vrij van suiker, lactose, alcohol, gluten en de meeste andere voorkomende allergene stoffen.
- In diverse smaken verkrijgbaar.
- Geschikt voor alle patiënten.



## COWS (Computer on Wheels)

Bent u op zoek naar een werkplek op wielen?

Onze COW, de zogenoemde Computer Op Wielen, zijn er in verschillende varianten en uitvoeringen, van een budget cart tot een duurzame high-end COW. Ook maatwerk van uw ideale mobiele IT werkplek is mogelijk. Daarnaast kunnen we u adviseren over het verlengen van de levensduur van COWS en bijstaan bij de transitie van oude naar nieuwe COWS.

De **budget laptop cart** is aantrekkelijk geprijsd en heeft een goede prijs-kwaliteit verhouding. Deze gemakkelijk te verrijden cart kan ook gebruikt worden als ECG cart in plaats van een laptop cart.

- Comfortabel, geïntegreerde voorgevormde handgrepen.
- Lichtgewicht.
- Opslagbakje standaard bij vaste hoogte. Bij H/L verstelling is een draadmand mogelijk.
- Als optie In hoogte verstelbare VESA-houder, bijvoorbeeld i.c.m. een laptop/tablethouder.
- Zeer gunstig prijsniveau en snel leverbaar.
- Verkrijgbaar in een vaste of een in hoogte verstelbare variant.



De **S-COW** is er voor ziekenhuizen en zorginstellingen en is leverbaar tegen een aantrekkelijke prijs.

- Groot werkblad van 550x580 mm.
- Comfortabel, geïntegreerde voorgevormde handgrepen.
- Gemakkelijker manoeuvreren, met minder last van vermoeidheid in de armen en polsen.
- Handmatig in hoogte te verstellen voor zowel zittend als staand werken.
- De geremde wielen zijn gemakkelijk met verpleegkundige klompen te bedienen.
- Veel accessoires verkrijgbaar zoals ladeblok, naaldenbekerhouder, afvalbakje, ruimte voor flessen, zeepdispenser, DIN-rail.
- Snel leverbaar tegen een gunstig prijsniveau.
- Geschikt voor het werken met o.a. laptops en tablets.



## Voordelen en eigenschappen **Non-powered COW:**

- Verstelbare monitorhouder: verhogen, verlagen, kantelen, draaien om een optimale kijkhoek en privacy te ondersteunen.
- Comfortabel, geïntegreerde voorgevormde handgrepen. Gemakkelijker manoeuvreren, met minder last van vermoeidheid in de armen en polsen.
- Toetsenbordhouder met links-rechts uittrekbaar muisplateau.
- Handmatig in hoogte te verstellen voor zowel zittend als staand werken.
- Remmen zijn gemakkelijk met verpleegkundige klompen te bedienen.
- Veel accessoires verkrijgbaar zoals afneembare medicijncassette, naaldenbekerhouder, afvalbakje, ruimte voor flessen, zeepdispenser, DIN-rail.
- Geschikt voor o.a. laptops en All-in-One PC's met interne accucellen.
- Snel leverbaar tegen een gunstig prijsniveau.
- Mogelijkheid tot montage medicijnopslag units. Vraag naar de mogelijkheden.



Op de rem zetten; voetbeweging van boven naar beneden.



Van de rem halen; dezelfde voetbeweging van boven naar beneden.

Producent, ontwikkelaar en importeur van innovatieve producten  
ten behoeve van de totale zorgsector

**Al meer dan 40 jaar uw partner in de zorg!**



Faradaystraat 14-01  
NL 4004 JZ Tiel

T +31 (0)344-615300  
F +31 (0)344-623784  
E [info@medimpex.nl](mailto:info@medimpex.nl)

**[www.medimpex.nl](http://www.medimpex.nl)**

